

D450

Manuel d'utilisation

édition juin 2006



TEL: 01 69 19 14 60
FAX: 01 69 19 14 61
E-mail: info@visiole.fr
<http://www.visiole.fr>

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT	PAGE 3
ACCESSOIRES LIVRES	PAGE 4
VUE D'ENSEMBLE DU D500	PAGE 5
GUIDE DE PRISE EN MAIN	PAGE 8
Installation du D500	PAGE 8
Marche / Arrêt	PAGE 10
Zoom	PAGE 10
Sélection des contrastes	PAGE 11
Lignage / Fenêtrage	PAGE 12
Table de lecture	PAGE 13
CARACTERISTIQUES	PAGE 14



AVERTISSEMENT !

NOTE: Cet équipement a été conçu dans le respect des exigences requises pour un

appareil de la classe numérique B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces exigences existent pour assurer une protection raisonnable contre une interférence possible dans le cadre d'une utilisation domestique.

Cet équipement utilise et peut générer des fréquences radio et, même s'il n'est pas installé et connecté, il peut selon les instructions causer des interférences.

Cependant, si toutes les précautions ont été prises pour atténuer d'éventuelles interférences, il n'y a aucune garantie pour que cela ne se produise pas. Si votre **D450** cause des interférences sur votre poste de radio ou sur votre télévision, cela peut être déterminé en l'éloignant de vos appareils, puis en faisant fonctionner ceux-ci afin de voir si l'interférence se reproduit. Si tel est le cas, vous êtes encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorientez ou remplacez l'antenne de votre radio ou télévision,
- augmentez la séparation entre le **D450** et votre radio ou télévision,
- connectez votre **D450** à une autre prise électrique que celle utilisée pour votre radio ou télévision,
- consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour solliciter de l'aide.

ATTENTION : Les changements ou les modifications apportés au produit et pas expressément approuvés par le fabricant (responsable de la conformité du produit) tombent sous la responsabilité de l'utilisateur.

■ Accessoires livrés avec votre D450



Adaptateur secteur



Câble pour téléviseur



Manuel d'utilisation

Si votre colis ne contient pas ces accessoires, merci de vous mettre en relation avec votre revendeur.




uit (écran non fourni)

Avec le **D450**, vous obtenez une image plus claire que celle obtenue

avec une loupe visuelle habituelle.


D450 est un système à l'utilisation sûre et robuste. Son utilisation est facilitée grâce aux divers modes de fonctionnement et sa table de lecture très ergonomique.

Le **D450** est conçu pour être utilisé tant par de jeunes enfants que par des personnes âgées.

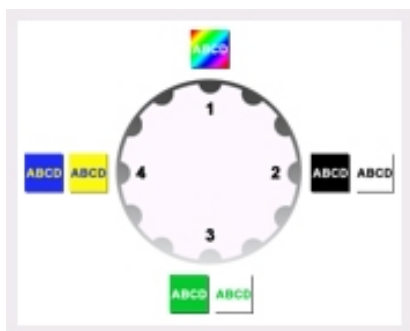

1) Des colorisations

Votre **D450** a été conçu en pensant aux utilisateurs malvoyants. Il propose 12 sélections de couleurs pour le fond du document et les caractères avec du monochrome et des niveaux de contraste,

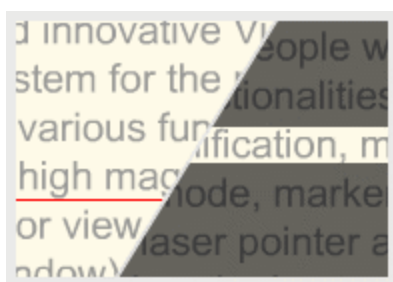

2) Lignage et fenêtrage

Avec votre **D450** vous pouvez afficher à l'écran une ligne ainsi qu'une "fenêtre", aussi bien en horizontal qu'en vertical, et pouvez ajuster celles-ci à vos besoins.

3) Nouvelle conception ergonomique

La table de lecture

- Les nouvelles poignées ergonomiques et la table



de lecture mobile facilitent la lecture des documents.

- Un bouton “blocage du plateau” permet de stopper tout mouvement du plateau.
- Des taquets de tabulations, positionnés à gauche et à droite du plateau permettent de limiter son déplacement latéral selon vos besoins. Cela permet par exemple de pouvoir ajuster le déplacement du plateau à la largeur d'une colonne de lecture.



Les boutons de commandes



Ils ont été conçus en pensant aux personnes malvoyantes. De formes différentes, ils sont gros et de couleur bleue. Cela permet de bien les reconnaître visuellement et tactilement.



L'écran

Si vous choisissez de poser l'écran sur votre **D450**, pensez à ajuster son inclinaison afin d'avoir une position de lecture plus confortable.

■ Vue générale de votre D450

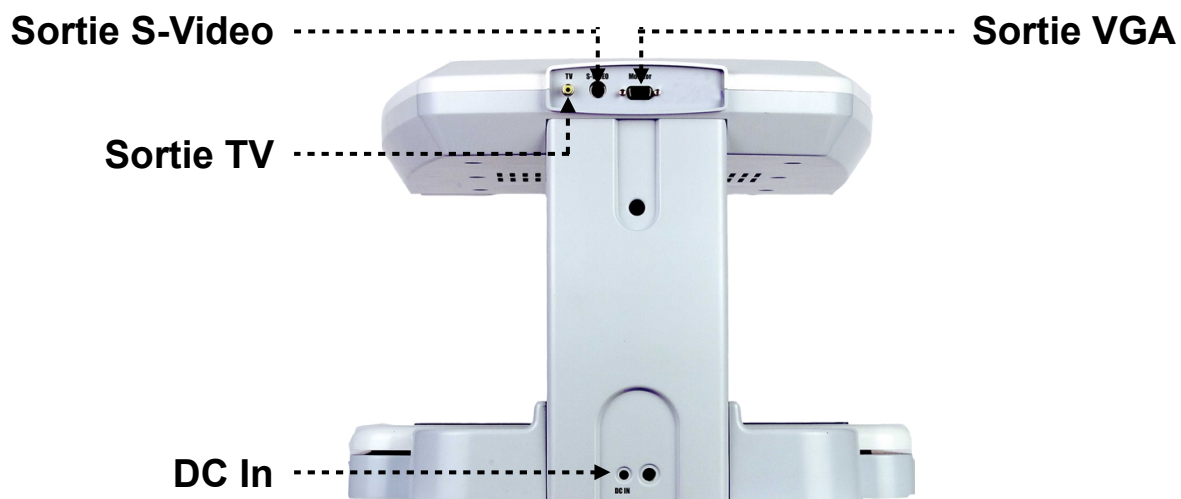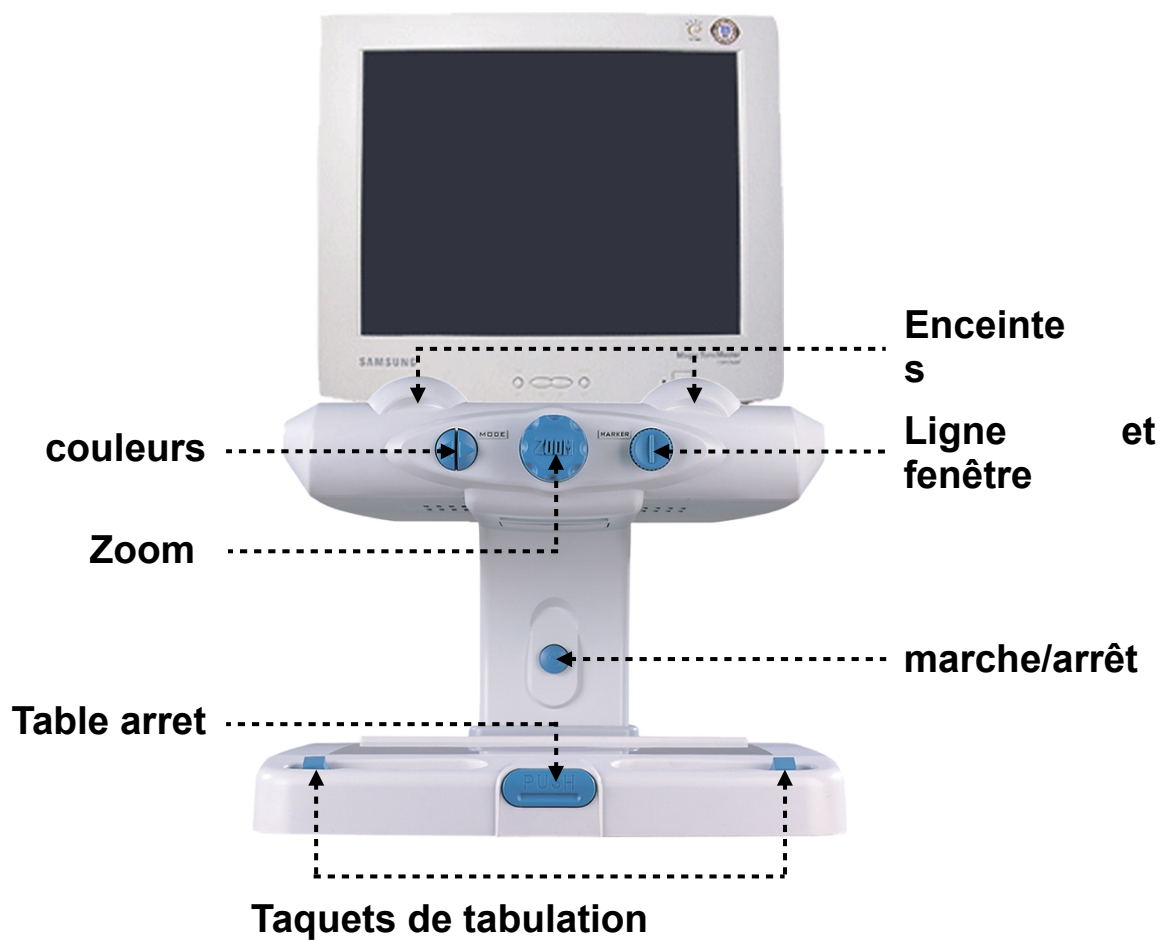


■ Guide de prise en main

1) INSTALLATION DU D450

- ◆ Placez l'appareil sur une table stable et plane, les boutons des commandes tournés vers vous.
- ◆ Connectez l'adaptateur secteur (fourni) à la prise DC IN au dos du **D450** et à une prise secteur.
- ◆ Connectez l'écran VGA ou le téléviseur au **D450**. Vous pouvez au choix mettre votre écran sur le **D450** ou à côté.


NB : ne pas connecter votre D450 en même temps à un moniteur et à un écran de télévision.

* Connexion de l'écran VGA

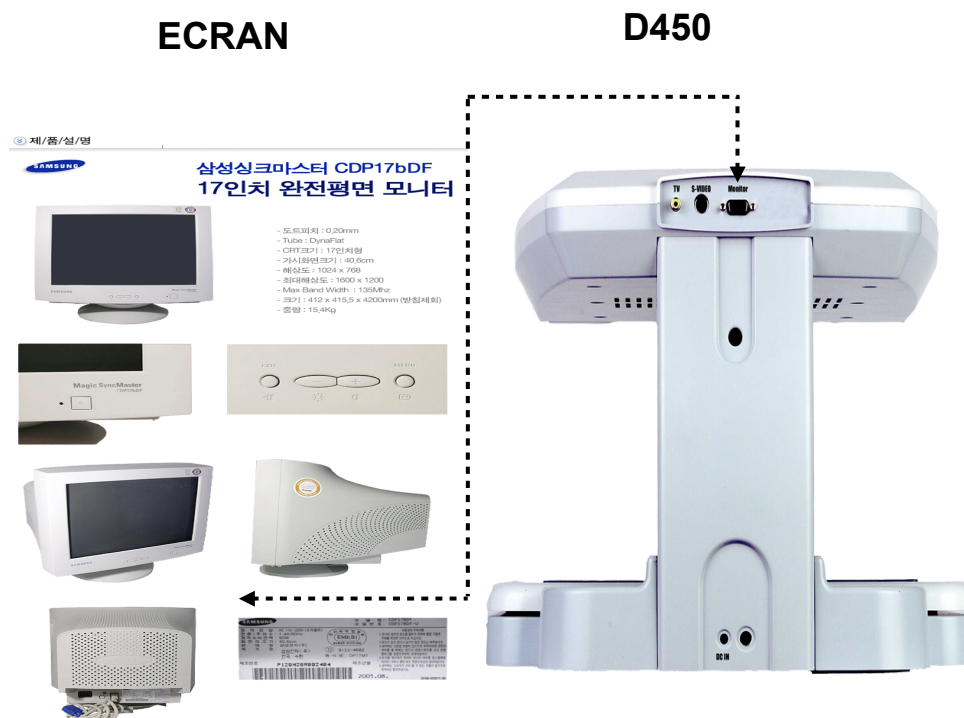

Connectez l'écran et le **D450** en utilisant le câble VGA (fourni avec votre écran). L'écran sera alimenté par son propre adaptateur secteur

* Connexion d'un écran de télévision

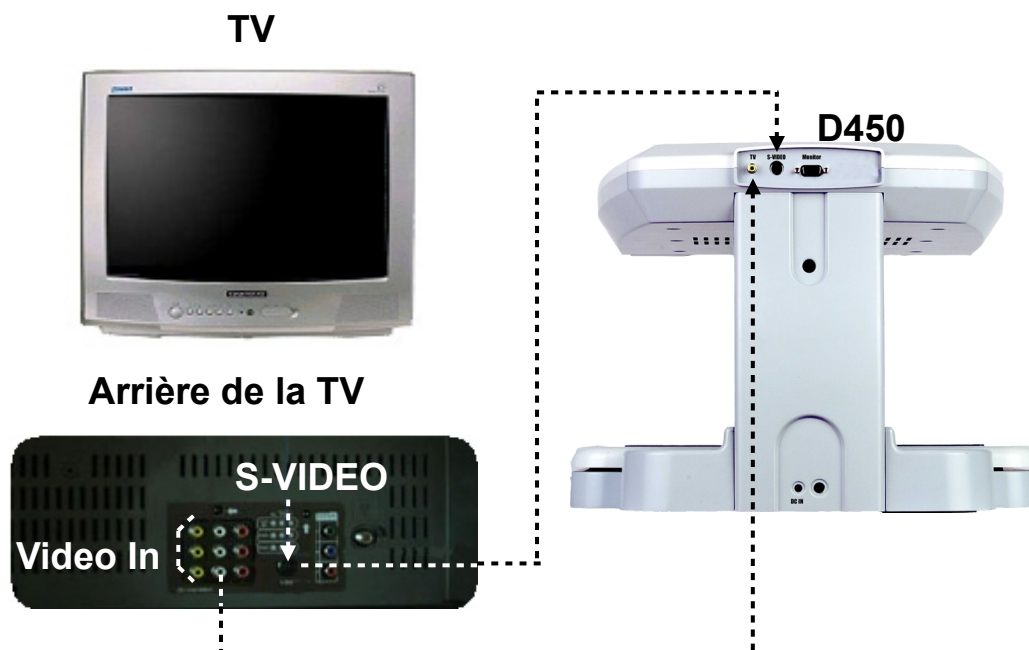


Les téléviseurs possèdent au moins deux prises d'entrée vidéo. Le **D450** se connecte à l'une d'elles.

1. Connectez **D450** dans la prise "Video In": Connectez le câble TV fourni entre le **D450** (prise jaune située à l'arrière de votre appareil) et une prise "Video In" de votre téléviseur.
2. Connectez **D450** dans la prise S-VIDEO : Connectez le câble TV fourni entre le **D450** (prise ronde noire située à l'arrière de votre appareil) et une prise "S-VIDEO" de votre téléviseur (prise ronde et noire).
3. Un ajustement au niveau de votre poste de télévision sera peut-être nécessaire. (le mode d'emploi du téléviseur pourra vous guider dans cet éventuel ajustement).


NB : attention, certaines télévisions n'ont pas de prise S-Video.

2) MARCHE / ARRET

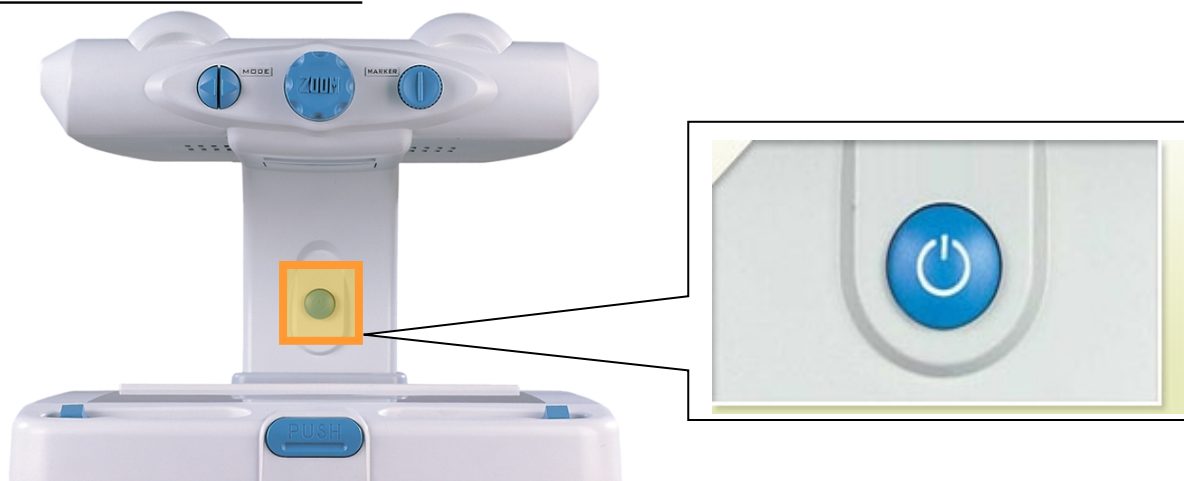

Appuyez sur le gros bouton bleu situé au fond du plateau et sur la potence, le **D450** s'allume. Appuyez à nouveau, le **D450** s'éteint.

3) ACTIVATION DU ZOOM

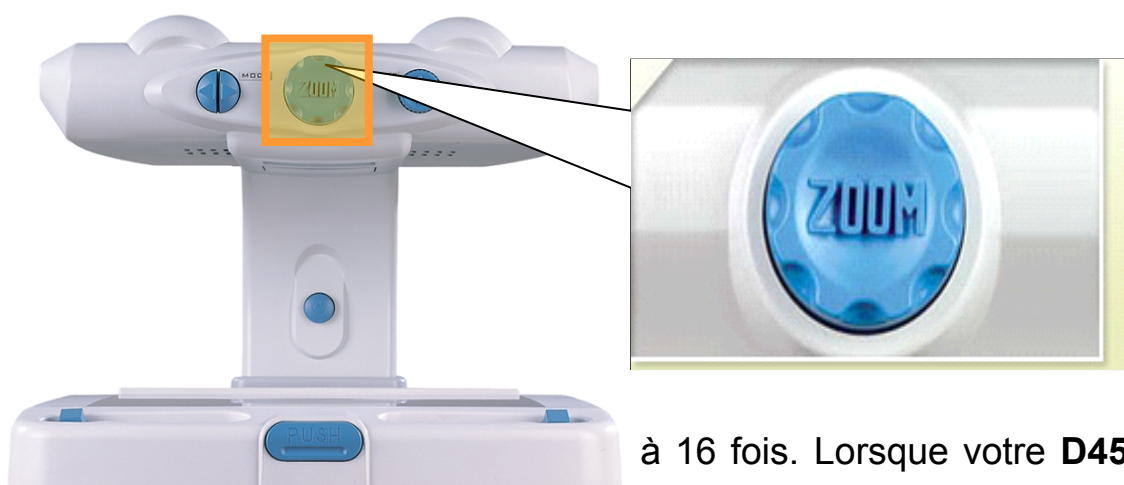

Le à 16 fois. Lorsque votre **D450** est arrêté, le dernier zoom est mémorisé. Après un arrêt, si vous allumez à nouveau votre **D450**, votre document apparaît à l'écran avec le dernier zoom activé.

4) SELECTION DES CONTRASTES



Ce bouton est composé de deux (2) parties (gauche et droite).

Le **D450** propose 12 combinaisons. Pressez la partie droite du bouton et à chaque impulsion vous naviguez du mode 1 à 12. Pressez la partie gauche du bouton et à chaque impulsion vous naviguez du mode 12 à 1.

MODE 1 à MODE 12 : bouton droit


MODE 12 à MODE 1 : bouton gauche

A l'arrêt du **D450** le dernier mode de couleur sélectionné reste en mémoire

Tableau récapitulatif des différents modes de couleurs et contrastes :

Normal			Contraste élevé			Négatif		
No.	Couleur du texte	Couleur du fond	No.	Couleur du texte	Couleur du fond	No.	Couleur du texte	Couleur du fond
1	Couleurs naturelles		2	Couleurs naturelles contraste fort		3	Couleurs naturelles en négatif	
4	Noir	Blanc	5	Noir	Blanc	6	Blanc	Noir
7	Vert	Blanc	8	Vert	Blanc	9	Blanc	Vert
10	Bleu	Jaune	11	Bleu	Jaune	12	Jaune	Bleu

5) LIGNAGE ET FENETRAGE

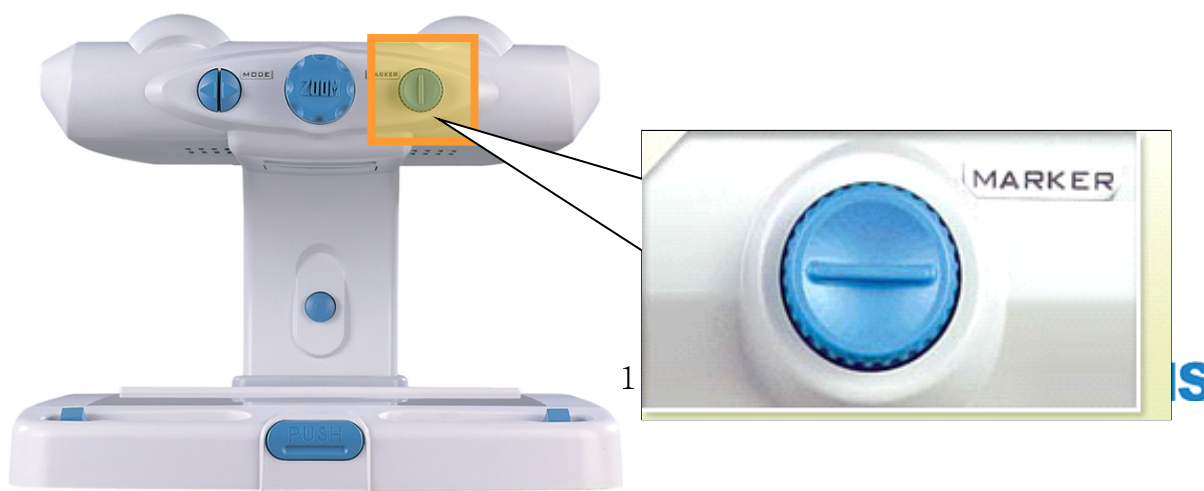


L'affichage d'une ligne ou d'une fenêtre sur votre écran, peut vous guider dans votre lecture. Le **D450** vous propose 4 affichages :

- 1 Ligne horizontale : appuyez sur le bouton rond et la ligne apparaît à l'écran puis tournez ce même bouton vers la gauche ou vers la droite vous verrez la ligne monter ou descendre dans l'écran.
- 2 Ligne verticale : appuyez à nouveau sur le bouton rond bleu, la ligne verticale apparaît. Tournez le bouton vers la gauche ou vers la droite, la ligne verticale se déplace à gauche ou à droite de l'écran.
- 3 Fenêtre horizontale : appuyez à nouveau sur le bouton rond bleu, la fenêtre horizontale apparaît, puis tournez ce même bouton vers la gauche ou vers la droite vous verrez la fenêtre horizontale s'agrandir ou diminuer.
- 4 Fenêtre verticale : puis appuyez encore une fois sur ce bouton et la fenêtre verticale apparaît. Tournez ce même bouton vers la gauche ou vers la droite vous verrez la fenêtre verticale changer de taille.

A chaque pression sur le bouton du "lignage/fenêtrage", vous activez soit une ligne ou une fenêtre (verticale ou horizontale) puis vous revenez à une image sans "lignage/fenêtrage". Pour faire évoluer dans l'écran la fonction choisie, il faut tourner le bouton vers la gauche ou la droite.

Comme précédemment, si vous arrêtez votre **D450** alors qu'une ligne ou une fenêtre était sélectionnée à l'écran, votre **D450** gardera cela en mémoire.

6) UTILISATION DE LA TABLE DE LECTURE

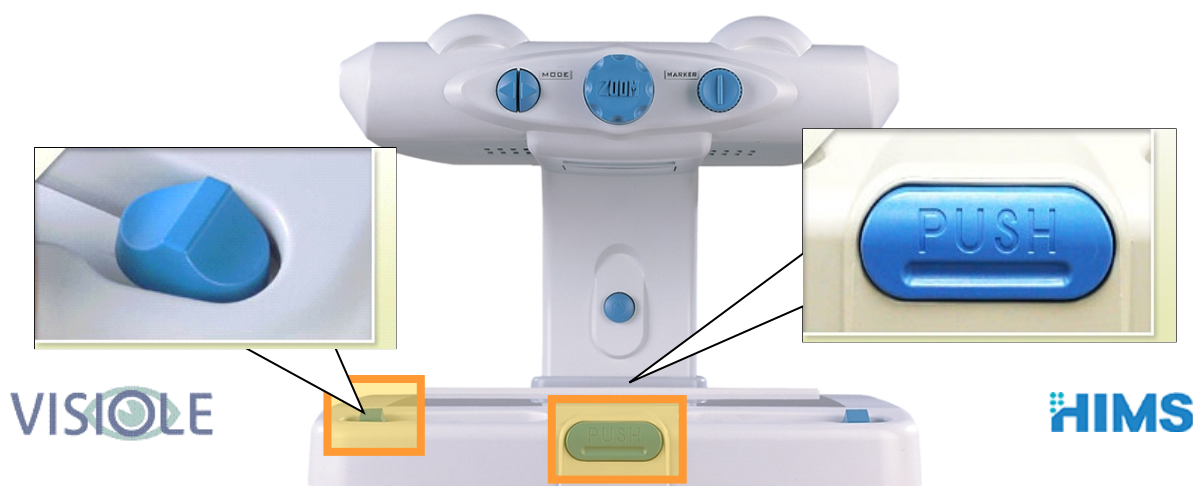

Pour lire un journal ou un cours article, le déplacement horizontal de la table peut être réduit. Pour cela, déplacez les deux boutons (situés aux extrémités du plateau de lecture) dans les crans prévus pour ajuster le déplacement du plateau à votre besoin.

Pour bloquer complètement le déplacement du plateau (en vertical comme en horizontal), appuyez sur le bouton 'PUSH' (situé sur le devant du plateau). Un deuxième appui sur ce bouton redonne du mouvement au plateau.

Caractéristiques

Grossissements	3x~22x (avec écran de 17")
Amplitude de la table	300mm (horizontal) * 270mm (vertical)
Alimentation	12V/3A
Taille	400mm(W) * 560mm(D) * 310mm(H)

Affichages		Image en couleurs naturelles, et 5 couleurs principales d'affichage (noir, blanc, bleu, vert, jaune,) Mode d'affichage du contraste normal, augmenté et négatif
Poids		13 kg
Entrée / Sortie	Entrée	Entrée pour connexion d'un PC (VGA, SVGA, XGA)
	Sortie	- VGA pour écran de type VGA - Vidéo-composite TV et S-Video pour écran de télévision

NOTE: Des modifications peuvent éventuellement être apportées à ce manuel d'utilisation à tout moment. ■